


HOLTEC

15 Hameau du Buisson Morlu
95670 Marly La Ville
France
Tel: 01.34.68.85.01
Fax: 01.34.72.97.05

MODE D'EMPLOI

POCHE POUR PONCTION D'ASCITE
POCHE DE RECUEIL DE 4 LITRES (REF: 04032008)

PONCTION D'ASCITE

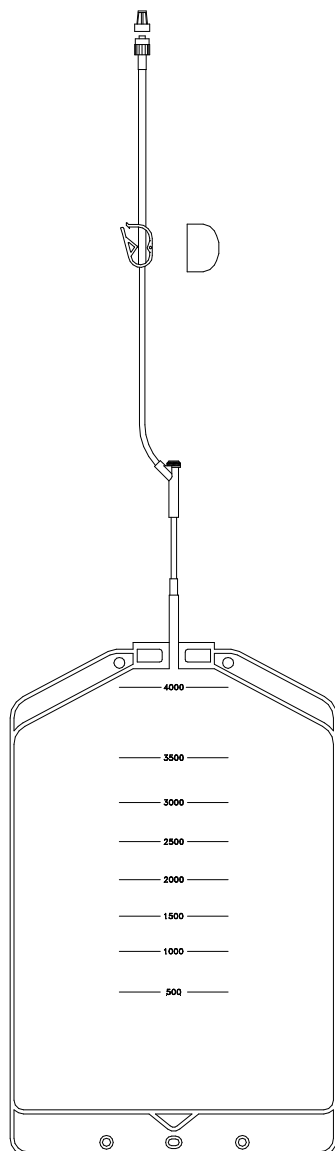

Classe stérile I

Le système est exempt de Latex

1 Précautions d'emploi:

- Conserver à l'abri du gel et plus généralement à une température comprise entre +10°C et +35°C.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage et s'assurer que le système ne présente aucun signe d'altération visible.
- Respecter les règles usuelles d'asepsie.
- Ne pas utiliser si le dispositif et/ou l'emballage présente un défaut d'intégrité ou un signe visible d'altération.
- Ne pas réutiliser le système si l'aiguille ou le cathéter est sorti accidentellement. Remplacer le matériel complet.
- Dispositif à usage unique. NE PAS REUTILISER.

2 Mode d'emploi pour le prélèvement d'ascite:

- Préparer l'ensemble du matériel: antiseptique spécifique, alcool à 50°C, champ stérile, compresses stériles, gants stériles, matériel de ponction ou cathéter veineux, ruban adhésif, seringue de volume adéquat, éventuellement robinet trois voies, tubes étiquetés pour examens biologiques, conteneur imperméable d'élimination des déchets souillés, piquants et/ou coupants.

N.B: Ne jamais recapuchonner l'aiguille ayant servi à la ponction d'ascite, ni éventuellement l'aiguille de prélèvement des échantillons. Nous recommandons l'usage d'un cathéter pour réaliser la ponction d'ascite.

2.1 Préparation du système:

- Fermer le clamp D du système de prélèvement d'ascite, situé sur la tubulure de prélèvement.
- Connecter le cathéter de ponction d'ascite.
- Éventuellement: connecter le robinet trois voies à la tubulure de prélèvement et connecter le cathéter et la seringue au robinet trois voies.

2.2 Asepsie du champ de ponction d'ascite:

- S'assurer de la propreté de l'abdomen et de son intégrité. Réaliser le lavage, puis l'asepsie de la zone de ponction (de la poitrine jusqu'au pubis), puis un second badigeonnage d'antiseptique. Déterminer le point de ponction et réaliser le prélèvement d'ascite.

HOLTEC

15 Hameau du Buisson Morlu
95670 Marly La Ville
France
Tel: 01.34.68.85.01
Fax: 01.34.72.97.05

MODE D'EMPLOI

POCHE POUR PONCTION D'ASCITE
POCHE DE RECUEIL DE 4 LITRES (REF: 04032008)
PONCTION D'ASCITE

2.3 Ponction d'ascite:

- Réaliser la ponction en observant le patient. Ponctionner perpendiculairement au plan cutané. Ouvrir le clamp D afin de procéder au prélèvement d'ascite.
- Maintenir la tubulure ou le cathéter en bonne position en entourant sa garde avec une compresse stérile fixée avec du ruban adhésif.
- Eviter de fixer la tubulure au lit car un mouvement du patient pourrait désinsérer le cathéter de ponction.
- Maintenir la poche en contre-bas sur une surface propre et/ou accrocher la poche à l'aide des crochets destinés à cet usage, dans les œilletons de la poche de recueil.
- Contrôler le volume prélevé durant la ponction, grâce à l'indication de volume présente sur la poche de recueil. Prélever la quantité de volume à évacuer en fonction de la durée prescrite par le médecin.

Dans le cas de l'utilisation d'un robinet trois voies:

- Enfoncer progressivement le cathéter tout en tirant sur le piston de la seringue et arrêter le geste dès que le cathéter se situe dans la cavité péritonéale et qu'apparaît du liquide. Prélever l'échantillonnage à l'aide de la seringue de 60 ml. Inverser le robinet trois voies et procéder au prélèvement de l'ascite dans la poche de recueil en ouvrant le clamp D.
- Pendant le prélèvement d'ascite suivre les recommandations précédentes.

2.4 Ponction d'ascite d'un volume supérieur à 4 litres:

- Si le prélèvement d'ascite est de volume supérieur à la capacité de la poche, alors connecter une autre poche de prélèvement, référencée 04032008, au robinet trois voies.
- Fermer le clamp D, inverser le robinet trois voies, connecter la seconde poche de prélèvement.
- Inverser le robinet trois voies, ouvrir le clamp D et continuer la ponction d'ascite.
- A la fin de la ponction d'ascite fermer tous les clamps.

2.5 Ponction d'ascite réalisée:

- Une fois la ponction réalisée, appliquer une compresse imbibée d'antiseptique sur le site de ponction en ôtant le cathéter utilisé pour le prélèvement d'ascite.
- Appliquer un pansement sec légèrement compressif sur le site de ponction.
- Eventuellement, effectuer un massage avec une compresse au niveau du point de ponction, afin de brouiller les différents plans de la paroi et éviter les fuites du liquide à l'extérieur ou dans la paroi abdominale.

Ne jamais recapuchonner les aiguilles de prélèvement et d'échantillonnage mais les éliminer sans déposer intermédiaire. Le liquide péritonéal doit être considéré comme une substance contagieuse.

Éliminer le matériel de ponction, cathéter veineux, seringue, système de prélèvement, poche, compresses, dans les conteneurs spécifiques à élimination des objets contaminés, souillés, piquants et/ou tranchant, à risques; selon la réglementation en vigueur.